



DIK ja DIX istuintyynynt

Istuintyynyissä yhdistyvät hygienisyys, tukevuus ja antidecubitusominaisuudet


Duqem **istuintyynynt** jakavat istujan painon mahdollisimman suurelle alueelle ja ehkäisevät näin pistekohtaista painetta ja parantavat verenkiertoa. Istuintyynynt muotoutuvat kehon lämmön ja painon vaikutuksesta istujan mukaan.

Matalan- ja keskiriskin istuintyynynt on suunniteltu tukemaan asentoa erilaisissa istuimissa mm. pyörätuoleissa. Istuintyynyntä on useita erikokoisia ja erityyppisiä käyttötarkoituksen mukaan.

Liukumattoman pintakankaan vuoksi Duqem-istuintyynynt pysyvät hyvin paikallaan istuimessa.

Eritteitä läpäisemätön ja joustava hygieniapäällinen on irrotettavissa pesua varten.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.

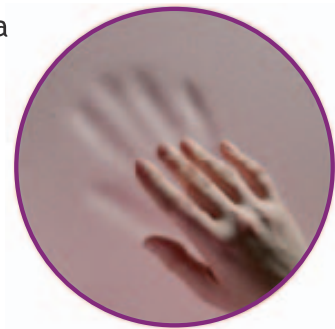

Erityisominaisuudet

- Viskoelastinen vaahtomuovi antaa hyvät antidecubitus-ominaisuudet
- Liukumattoman pinnan ansiosta tyyny pysyy hyvin paikoillaan eri alustoilla
- Estää tyynyä käyttävää henkilöä liukumasta pois paikaltaan
- Eritteitä läpäisemätön, hiostamaton ja hengittävä kangas
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Helpottaa istuinalueen verenkiertoa
- Sopii koti- ja laituskäyttöön

Päällinen

Duqem-hygieniapäällinen on valmistettu ihoystävällisestä kankaasta, jossa on antibakteerisia ainesosia. Vetoketjua peittää tippasuoja.


Istuintyynymallit

DIK-istuintyyny

- Pehmentävä ja hoitava istuintyyny
- 6 cm korkea viskoelastinen vaahtomuovi

DIX-istuintyyny

- Tukeva, pehmentävä ja hoitava istuintyyny
- Rakenne: puristevaahto 2 cm + viskoelastinen vaahtomuovi 4 cm sopii erityisesti pyörätuoleihin, joissa istuinosa on kangasverhoiltu

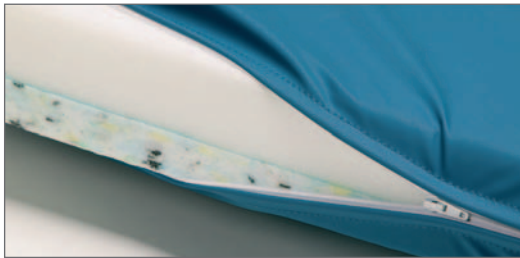

DIX-istuintyyny

Standardikoot

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
38	42	6
40	40	6
42	45	6
40	45	6
45	50	6

Valmistamme myös muita kokoja.

Hoito-ohjeet

- Pintapyyhintä tarvittaessa neutraaleilla tai antiseptisilla puhdistusaineilla
- Päällinen irrotetaan pesua varten
- Päällinen kestää hyvin konepesua (max 75 °C)
- Ei linkousta, riippukuivatus
- Eritetahradesinfektio
 - Klooriliuos 500-2000 ppm (max 5000 ppm)
 - Etanolipohjaiset desinfektioaineet
 - Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2%)
 - Lämpödesinfektio max 85 °C
- Duqem-istuintyynyn kanssa käytettävä aina hygieniapäällistä
- Tyynyn sisustaa ei suositella pestäväksi

Paloturvallisuus

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Standardit

